



Manual de Usuario

Índice

Objetivos de la aplicación	1
Requisitos del sistema	1
Ingreso a la aplicación	1
Contenido.....	3
Pantalla principal de VDALTON.....	3
Pantalla TEST.....	3
Test 1 ¿Qué es lo que ves?.....	4
Test 2 Ordena los colores.....	6
Resultados	7
Activacion de Filtro	7

Objetivos de la aplicación

La aplicación **VDALTON** es un programa dirigido personas con daltonismo, el cual sirve para adaptar la configuración de color a la condición del usuario.

Se trata de un programa fácil de aprender, intuitivo y simple.

La presente guía de usuario muestra una visión general de las características de la aplicación y se indican las instrucciones que deben seguirse paso a paso para su uso.

Requisitos del sistema

Asegure que su computadora satisfaga o supere los siguientes requisitos antes de utilizarlo:

CPU	Intel Celeron o similar (Intel i series Recomendado)
MEMORIA RAM	1GB (2GB Recomendado)
ESPACIO DISPONIBLE EN DISCO	20MB
SISTEMA OPERATIVO	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 bits o 64 bits)

Ingreso a la aplicación

- Para iniciar VDALTON, haga doble clic sobre el archivo con nombre VDalton.

Para encontrarlo, diríjase a Barra de Tareas > Explorador de Archivos > Documentos > VDalton o en otro caso, diríjase a Barra de Tareas > Explorador de Archivos > Descargas > VDalton.

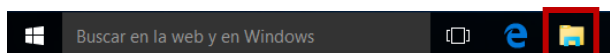


Ilustración 1. Barra de Navegación Windows 10

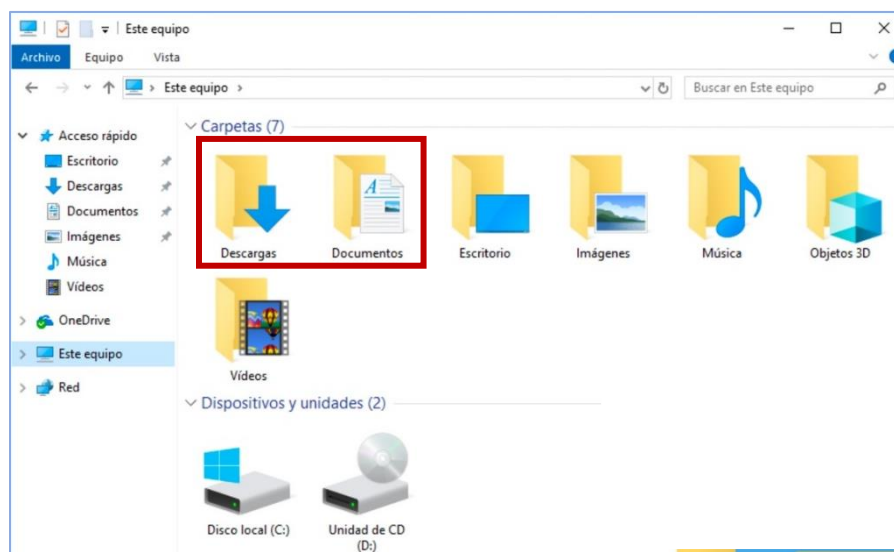


Ilustración 2. Explorador de archivos Windows 10

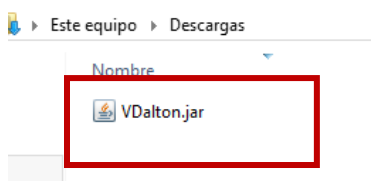


Ilustración 3. Archivo VDALTON

Nota Importante:

Esta aplicación ha sido desarrollada para trabajar en la plataforma de Windows, por lo que los siguientes conceptos básicos ya **deben ser identificados**:

- Uso del Ratón
- Manejo de Ventanas
- Uso de botones
- Abrir / Cerrar Notificaciones

Contenido

Pantalla principal de VDALTON

Al ejecutar el archivo VDALTON, podrá notar el logo y una música de fondo. A continuación, se presenta una ventana el cual le da acceso a la aplicación.



Ilustración 4. Pantalla principal VDALTON

- Para poder iniciar, pulse el botón COMENZAR.

Nota importante:

En cualquier momento, usted puede cerrar o regresar, pulsando los botones correspondientes.

Pantalla TEST

El programa cuenta con dos tipos de Test, puede probar con el que guste.

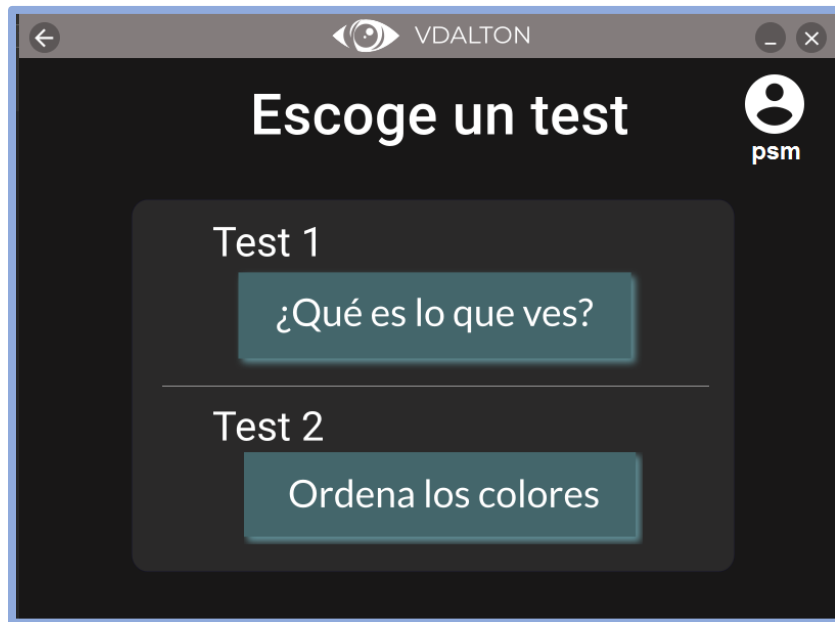


Ilustración 5. Pantalla Escoger Test

- Para iniciar un Test, **haga clic sobre el botón correspondiente.**
 - Pulse "¿Qué es lo que ves?" para iniciar el Test 1.
 - Pulse "Ordena los colores" para iniciar el Test 2.
- Si desea regresar a la pantalla principal, pulse el icono superior izquierdo
Regresar

Test 1 ¿Qué es lo que ves?

Este apartado esta dirigido para realizar la prueba identificando las formas que puede apreciar dentro de los círculos.

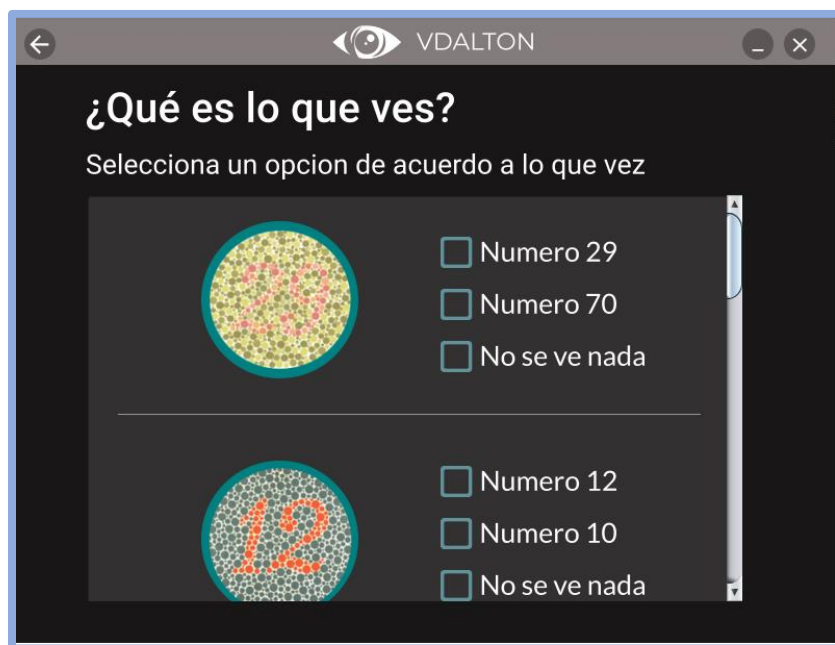


Ilustración 6. Test Ordena los colores

Para contestar el Test, debe seguir los siguientes pasos.

- Si quiere seleccionar una opción, **pulse el cuadro deseado**.
- Conteste todos los apartados.
- Al finalizar, **pulse el botón "Listo"**.

Consideraciones de esta prueba a tomar en cuenta:

- Solo puede seleccionar una opción por apartado.
- Para ver mas contenido, puede bajar o subir la barra lateral

En caso de no estar completa la prueba, se le mostrará la siguiente ventana:

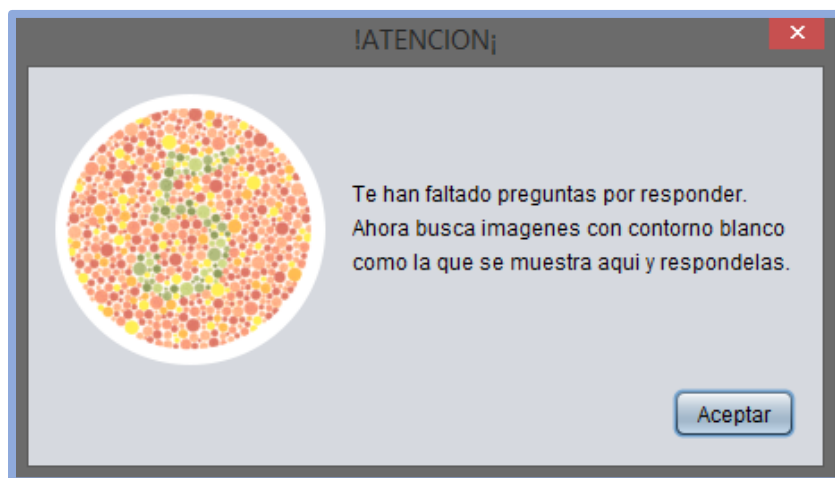


Ilustración 7. Aviso de Sistema

- Antes de cerrar, se le recomienda leer con atención.
- Para cerrar la ventana, **pulse el botón Aceptar**.

Ante este mensaje, se le sugiere terminar el Test, con el cual el sistema le ayudara marcando con contorno blanco los apartados faltantes.

Test 2 Ordena los colores

Esta prueba consiste en ordenar los cuadros de colores de mayor a menor luminosidad



Ilustración 8. Test Ordena los colores

- Para seleccionar un cuadro, mueva el cursor encima de alguno y haga clic.
- Arrastre el cuadro hacia una casilla vacía de la parte inferior
- Cuando termine de acomodar, aparecerá una flecha verde a un costado, que indica que puede seguir
- Para finalizar, presione el botón LISTO de la parte de abajo.

Nota importante:

Para mover los cuadros, es necesario arrastrarlos manteniendo pulsado el botón derecho de su ratón. Si no puede observar la flecha verde, asegúrese de acomodar los cuadros debidamente.

Resultados

Al acabar de realizar alguno de los Tests disponibles, podrá ver la siguiente ventana, en el que le mostrará la condición que pueda tener.

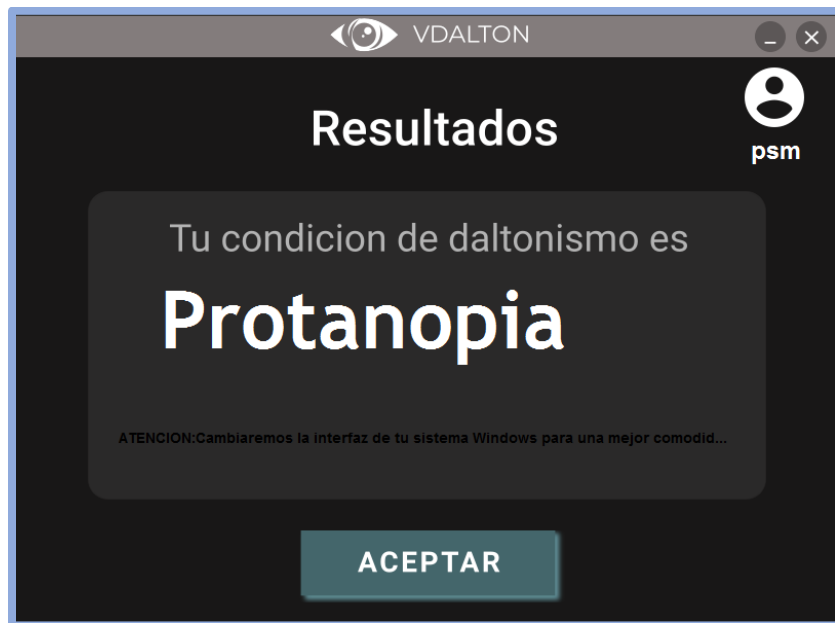


Ilustración 9. Pantalla resultados. "Este es un ejemplo"

- Si desea que la aplicación realice los cambios a su pantalla, presione el botón Aceptar en la parte inferior.

Activacion de Filtro

Al presionar el botón Aceptar, la aplicación automáticamente realizara los cambios correspondientes de su pantalla.

VDalton busca su comodidad ocultando la aplicación y mostrando mensajes en la barra de notificaciones.

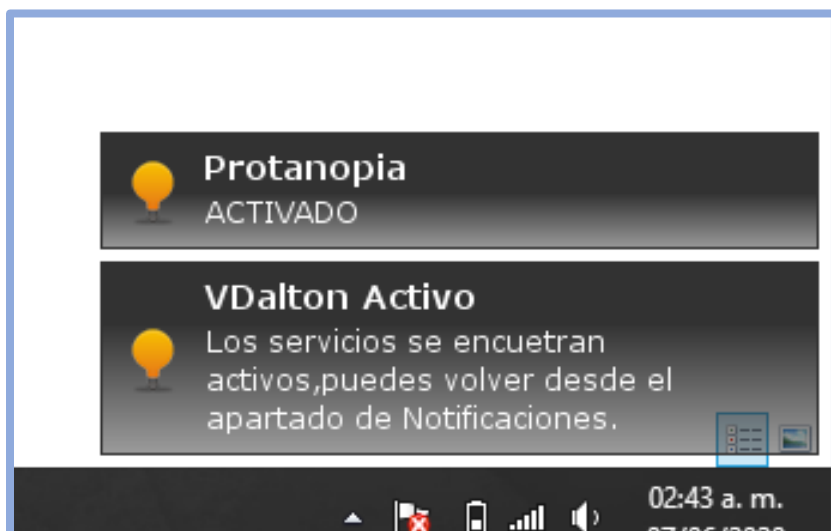


Ilustración 10. Notificación de VDALTON. Ejemplo

En cualquier momento que desee, puede **abrir VDALTON haciendo clic en Área de Notificación >Clic derecho a la imagen**

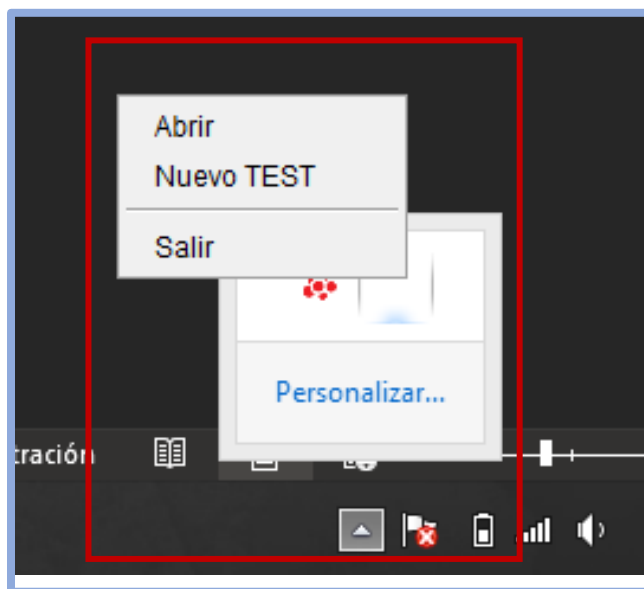


Ilustración 11. VDalton en segundo plano

- Puede **pulsar Abrir para ver la pantalla Resultados**
- **Haga clic en Nuevo Test** si desea realizar una nueva prueba
- Para cerrar VDALTON, **pulse Salir**.

Nota Importante:

VDalton guarda su configuración al realizar un Test, por lo que, al volver a ejecutar la aplicación, ya no es necesario realizar una prueba